Fotona
choose perfection

Dynamis

XS LINE



Клиника лазерной медицины в одном аппарате

Лазерные системы Dynamis

Самая высокая производительность, легкое и удобное использование

Преимущества

- Высокая точность при обработке тканей
- Интуитивный и легкий выбор параметров
- Самый широкий диапазон лечебных режимов
- Большой выбор современных аксессуаров
- Минимально инвазивные, безопасные процедуры и короткое время реабилитации
- Превосходный комфорт и уровень удовлетворенности пациентов

Эргономичный дизайн жесткого световода Rotoflex обеспечивает **удобство работы**

Технология применения двух длин волн (2940 нм и 1064 нм) предоставляет **уникальный спектр процедур**

Интуитивно понятный и «умный» **графический интерфейс**

Мгновенный доступ в меню программ лечения посредством большого экрана

Беспроводная педаль для удобства работы



Предсказуемый результат за счет применения луча с профилем Top-Hat

Двойной контроль системы EFC обеспечивает абсолютную точность подачи лазерной энергии каждого импульса

Универсальность благодаря широкому ассортименту лазерных аксессуаров (манипул и сканеров)

Высокая безопасность процедур обеспечивается запатентованной технологией VSP

ОДИН ИЗ САМЫХ ОКУПАЕМЫХ ЛАЗЕРОВ

«Dynamis – это чрезвычайно хорошо сделанная универсальная платформа с широким диапазоном применений (более 50 одобренных FDA процедур) в таких областях как эстетика, дерматология, хирургия, подиатрия, офтальмология и гинекология. Один из моих самых любимых лазеров, у которого, к тому же, нет расходных материалов. Он как «роллс-ройс» на рынке лазеров, который сделан вручную, чтобы добиться совершенства. Это определенно один из самых лучших лазеров, с которыми я когда-либо работал». **M.Taylor, США**

Er:YAG лазер для эстетической медицины




Лучшее поглощение


Длина волны **Er:YAG** лазера имеет наилучшее поглощение по воде при минимальном проникновении, что позволяет выполнять полный комплекс поверхностных работ от легкого холодного пилинга до шлифовки кожи с эффектом подтяжки.

Технология **VSP** позволяет регулировать режимы лазерной процедуры от коротких импульсов с длительностью 100 мкс (MSP), до сверхдлинных с длительностью 1500 мкс (XLP). Изменение длительности импульса позволяет управлять соотношением абляция/коагуляция в рамках каждого импульса и процедуры в целом с непревзойденной точностью.



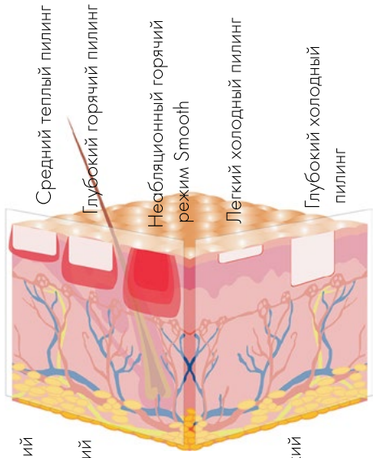


Выбор различных доступных лазерных лечебных режимов VSP Er:YAG

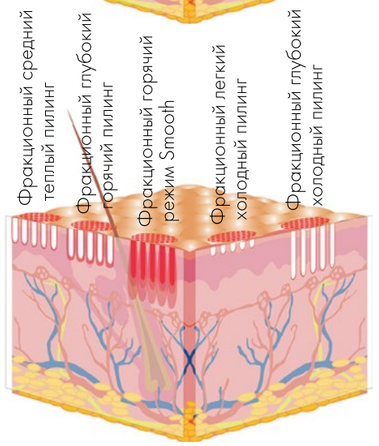

Выбор различных доступных фракционных лазерных лечебных режимов

Преимущества


- Самое высокое поглощение по воде
- Лучший коэффициент абляции
- VSP технология для контроля соотношения абляции/коагуляции
- Спектр процедур от поверхностной холодной до глубокой горячей абляции
- Технологии полного и фракционированного луча
- Специальные режимы TURBO и SMOOTH®

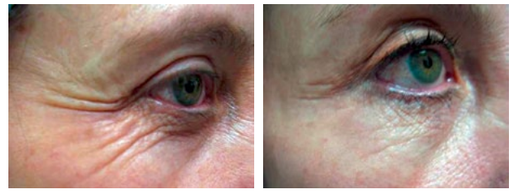

Периорбитальные морщины,
с разрешения C. Pidal



Доброкачественные образования,
с разрешения O. Matyunin

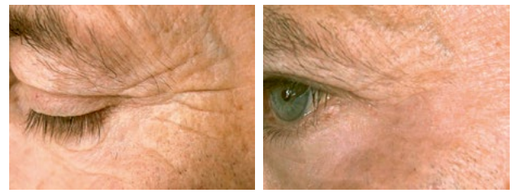

Периорбитальные морщины,
с разрешения R. Sult

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ВРЕМЕНЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОПАСНОСТЬЮ ГИПЕРПИГМИНТАЦИИ

«Dynamis Er:YAG – это очень эффективный инструмент для процедур реконструкции кожи. Лазерная система позволяет соблюсти баланс между эффективностью, временем восстановления и опасностью возникновения PIH (постоперационной воспалительной гиперпигментации)». **A.S.Lun, Гонконг**

VSP технология и Er:YAG фракционные процедуры

От маленького повреждения к большому эффекту

ФРАКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ позволяют наносить микроповреждения на участки кожи с помощью лазерного луча. Основная площадь кожи остается неповрежденной, что обеспечивает быстрое восстановление и короткий реабилитационный период.



Преимущества


- Малоинвазивная реконструкция кожи
- Ускоренное восстановление
- Быстрое заживление ран
- Идеально для коррекции рубцов

F22-СКАНЕР

- Контролируемое компьютером сканирование поверхности
- Непревзойденная точность и однородность покрытия больших областей
- Интенсивные фракционные процедуры
- Возможность выбора площади сканера
- Глубина фракционной работы от 19 микрон до 5-7 миллиметров
- Диаметр микролуча 250 мкм

FS01 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФРАКЦИОННАЯ МАНИПУЛА


- Любые фракционные процедуры от «холодных» до «горячих»
- Диаметр микролуча 250 мкм
- Быстрая работа методом «штампа»

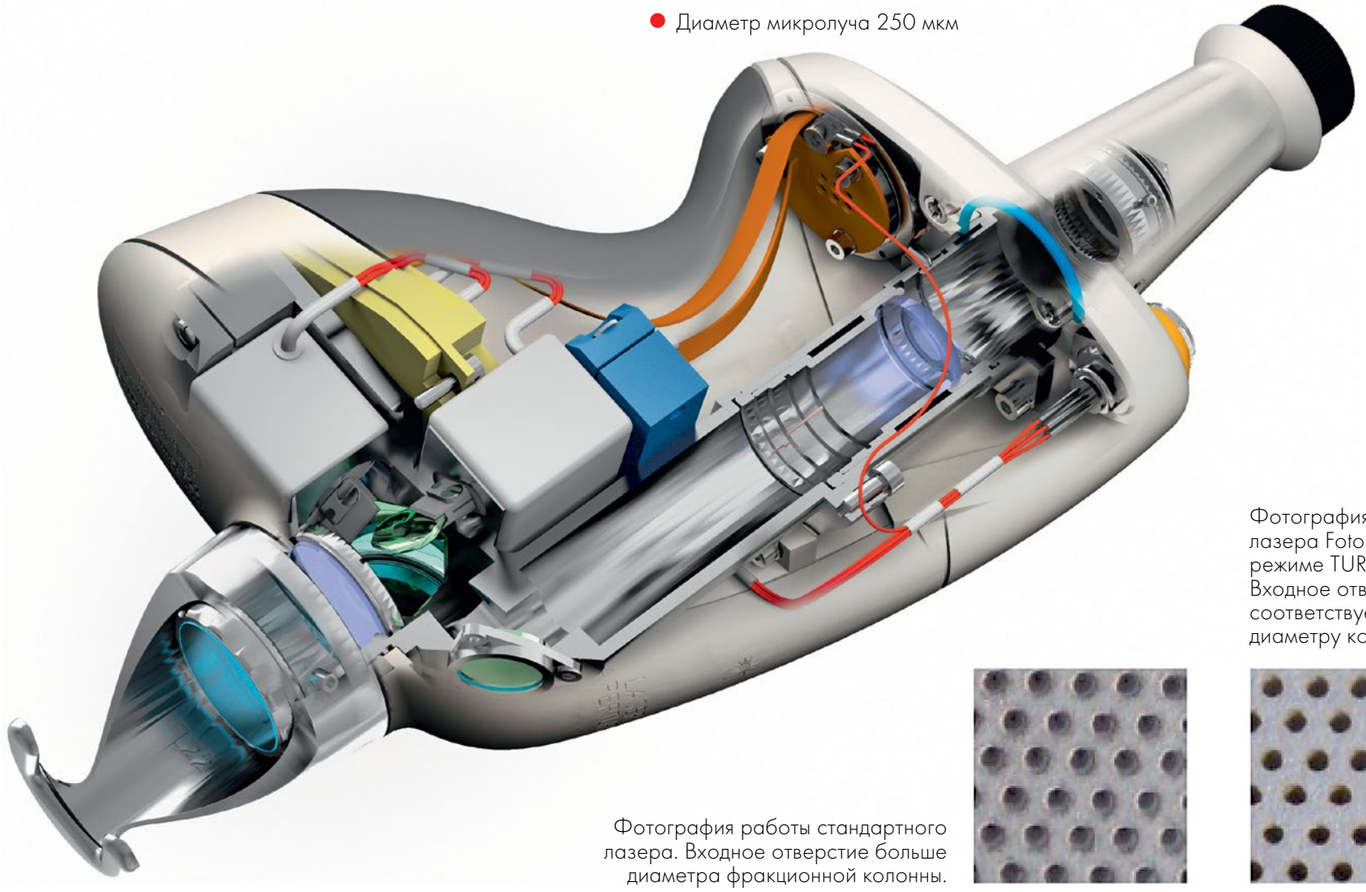

Фотография работы стандартного лазера. Входное отверстие больше диаметра фракционной колонны.

Фотография работы лазера Fotona в режиме TURBO. Входное отверстие соответствует диаметру колонны.

TURBO РЕЖИМ – уникальная технология повторного прохода импульсом в ту же точку, увеличивающая глубину абляции. Формирует абляционную колонну **с гладкими краями и минимальным повреждением поверхности эпидермиса.** Обеспечивает эффективные процедуры с укороченным периодом реабилитации.

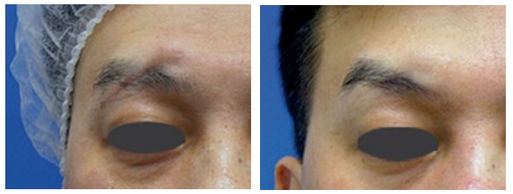

Разглаживание рубца,
с разрешения A. Au



Периоральные морщины,
с разрешения F. Paciolla



Разглаживание рубца,
с разрешения H. M. Omparkash



Рубцы постакне,
с разрешения Y. Targonskaya

Режим SMOOTH® Мягкое разглаживание кожи


Уникальный неаблятивный режим Er:YAG для неинвазивных тепловых процедур



МАНИПУЛА PS03


2-7 мм, с возможностью реализации режима SMOOTH® во фракционном режиме

РЕЖИМ FOTONA SMOOTH® обрабатывает кожу по плоскости неаблятивным способом, без повреждения эпидермиса с точно контролируемым повышением температуры. Режим Fotona SMOOTH® – пакетный импульс с общей длительностью 0,25 с обеспечивает прогрев кожи на глубину до 400 мкм.

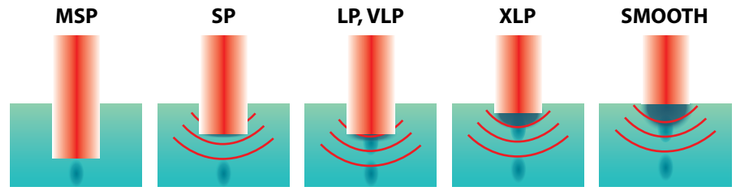

Лазер VSP Er:YAG в системах Dynamis может быть точно настроен от переменной «холодной» и «горячей» абляции до неаблятивного теплового режима SMOOTH®

Импульс в SMOOTH® режиме

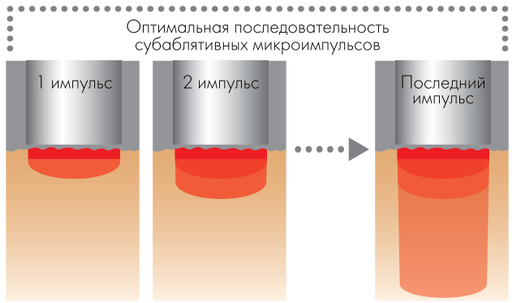

Тепловая неаблятивная процедура без риска возникновения кровотечения или повреждения тканей.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ НЕАБЛЯТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ КОЖИ ER:YAG ЛАЗЕРОМ

Режим Fotona SMOOTH® позволяет проводить неаблятивную лазерную реконструкцию кожи, основанную на контролируемом тепловом повреждении коллагена, без разрушения эпидермиса. Дополнительно к мгновенному эффекту, вызываемому сокращением волокон коллагена, присоединяется отсроченный эффект по стимуляции неоколлагенеза. Процедура приводит к восстановлению тургора и повышению эластичности обработанной ткани. Процедура не имеет периода реабилитации.



SmoothLiftin™ Внутриротовое разглаживание морщин,
с разрешения A. Gaspar




Реконструкция кожи,
с разрешения A. Gaspar



Реконструкция кожи,
с разрешения C. Pidal

NightLase® FOTONA VSP Er:YAG лазер для лечения храпа

- Неинвазивное тепловое воздействие на мягкое небо для уменьшения храпа
- Без боли, без анестезии

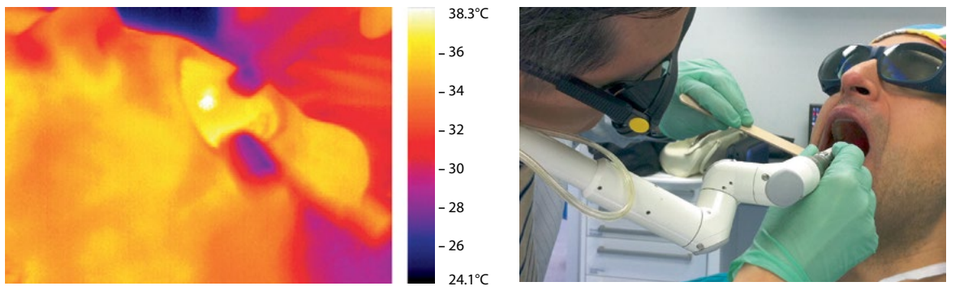

Fotona NightLase® – запатентованный, быстрый, неинвазивный и удобный способ улучшить качество сна пациента. NightLase® снижает риск апноэ, уменьшает амплитуду храпа. Выполняется при помощи поверхностных лазерных импульсов. Лечение проводится с использованием Er:YAG лазера на лазерной системе Fotona SP Dynamis.

Во время процедуры NightLase®, лазерный свет нагревает ткани и стимулирует уплотнение тканей мягкого неба. Результаты клинических исследований* подтвердили, что процедура Fotona NightLase® с применением лазера Er:YAG является безопасным и эффективным методом для значительного уменьшения храпа.

* K. Miracki, Z. Vizintin Nonsurgical Minimally Invasive Er:YAG Laser Snoring Treatment. J Laser Health Acad, Vol. 2013, No.1
K. Svahnstrom Er:YAG Laser Treatment of Sleep-Disordered Breathing. J Laser Health Acad, Vol. 2013, No.2.


Тепловые VSP Er:YAG процедуры с режимом SMOOTH® для гинекологии

Ключевые процедуры


- Минимально инвазивные запатентованные гинекологические процедуры, выполненные по технологии Fotona SMOOTH®
- Лечение недержания мочи при напряжении
- Лечение синдрома вагинальной релаксации

IncontiLase®

- Лазерное лечение стрессового и смешанного недержания мочи
- Фототепловое уплотнение области уретры и передней вагинальной стенки
- Фототепловое лечение опущения стенок влагалища

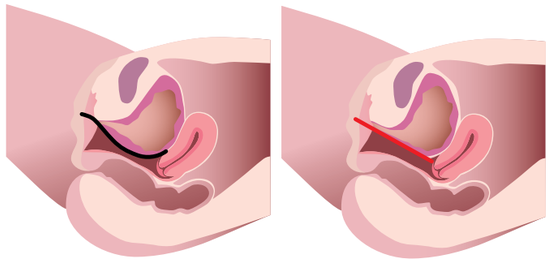

Клинические исследования подтверждают, что процедура IncontiLase® является эффективной, безопасной и комфортной лечебной опцией для облегчения симптомов у пациентов со слабой или средней степенью недержания мочи.

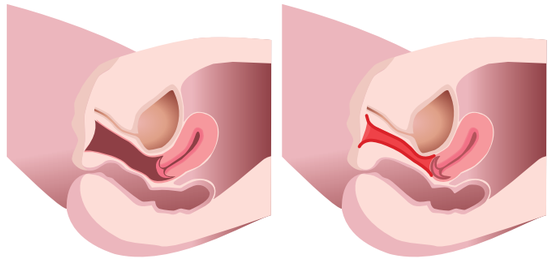

Научные результаты демонстрируют восстановление тонуса стенок влагалища и повышение сексуального удовлетворения.

IntimaLase®

- Интимное омоложение
- Фототепловое сужение вагинального канала
- Послеродовое восстановление
- Улучшение качества половой жизни

Fotona 4D™: многоуровневое воздействие для максимального результата

СИНЕРГИЗМ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДЛИН ВОЛН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

Сочетание методик трехмерной (3D) реконструкции кожи лица с использованием Er:YAG и Nd:YAG лазеров с методикой внутриротового воздействия Fotona SMOOTH® на слизистую поверхность щек и губ, позволяет получить новый эффект омоложения Fotona 4D™.

Дополняющие друг друга длины волн Fotona Er:YAG и Nd:YAG совместно действуют в четырех различных режимах: SMOOTH®, FRAC3®, PIANO® и SupErficial™ для омоложения глубоких, средних и поверхностных структур кожи.

4D лазерная процедура Fotona включает обработку внешней поверхности кожи лица и внутренней поверхности щек и губ со стороны слизистой ротовой полости. Процедура позволяет добиться выраженного сокращения коллагена во всем объеме тканей. В результате процедуры наблюдается восстановление тонуса и тургора тканей и выравнивание контура лица. Эффект волюмизации сопоставим с эффектом от введения филлеров.


Комбинация этих четырех уникальных режимов и двух синергичных длин волн приводит к значительному лифтингу тканей лица всего за один сеанс.



До После Fotona 4D™ омоложения
с разрешения A. Gaspar

ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

«Внутриротовая неаблятивная процедура SmoothLiftin™ приводит к объемному эффекту в носогубных складках изнутри, аналогичный эффект происходит при введении филлера. Комбинация трех лечебных режимов для кожи Fotona Dynamis с четвертым интраоральным SmoothLiftin™ дает врачам новую, мощную, неинвазивную процедуру. Вместе эти четыре уникальных лазерных режима обеспечивают проникновение лазерного света на всю толщину тканей, что приводит к впечатляющему эффекту». **Dr. M.C.Lee, США**

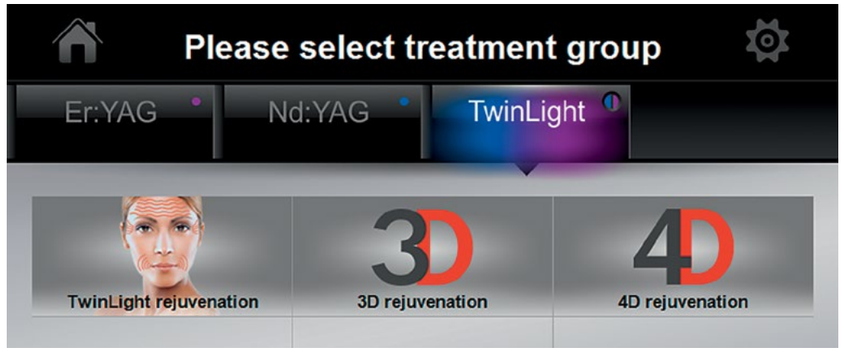

Широкий диапазон лечебных режимов от двухмерной процедуры Twinlight™ до четырехмерной процедуры Fotona4D™.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

«Процедура Smoothliftin™ – это безболезненная, не требующая анестезии процедура, не имеющая периода реабилитации. Более того, процедуру можно выполнять круглый год, включая летние месяцы, без риска появления неблагоприятных эффектов, таких как постпроцедурная гиперпигментация». **Dr. A. Gaspar, Аргентина**

Набор современных манипул и сканеров

Er:YAG



Фракционная **PS01**, MSP–XLP, SMOOTH®



Фракционная **PS02**, MSP–XLP, SMOOTH®



Фракционная **PS03**, 2–7 мм, MSP–XLP, SMOOTH®



Полнолучевая **R04**, 2–12 мм, MSP–XLP, SMOOTH®



Лазерный скальпель **R08-Ti**, 0,45 мм, MSP–XLP



Полнолучевая **R11**, 2–7 мм, MSP–XLP, SMOOTH®



Фракционная **FS01**, MSP–XLP



G-SET, SMOOTH®

Nd:YAG



R33, 2–10 mm, VERSA, FRAC3®, PIANO®



R34, 15–20 mm, VERSA, PIANO®




R27 хирургическая, QCW



F-RUNNER, MSP–XLP



S-RUNNER, MSP–XLP, SMOOTH®

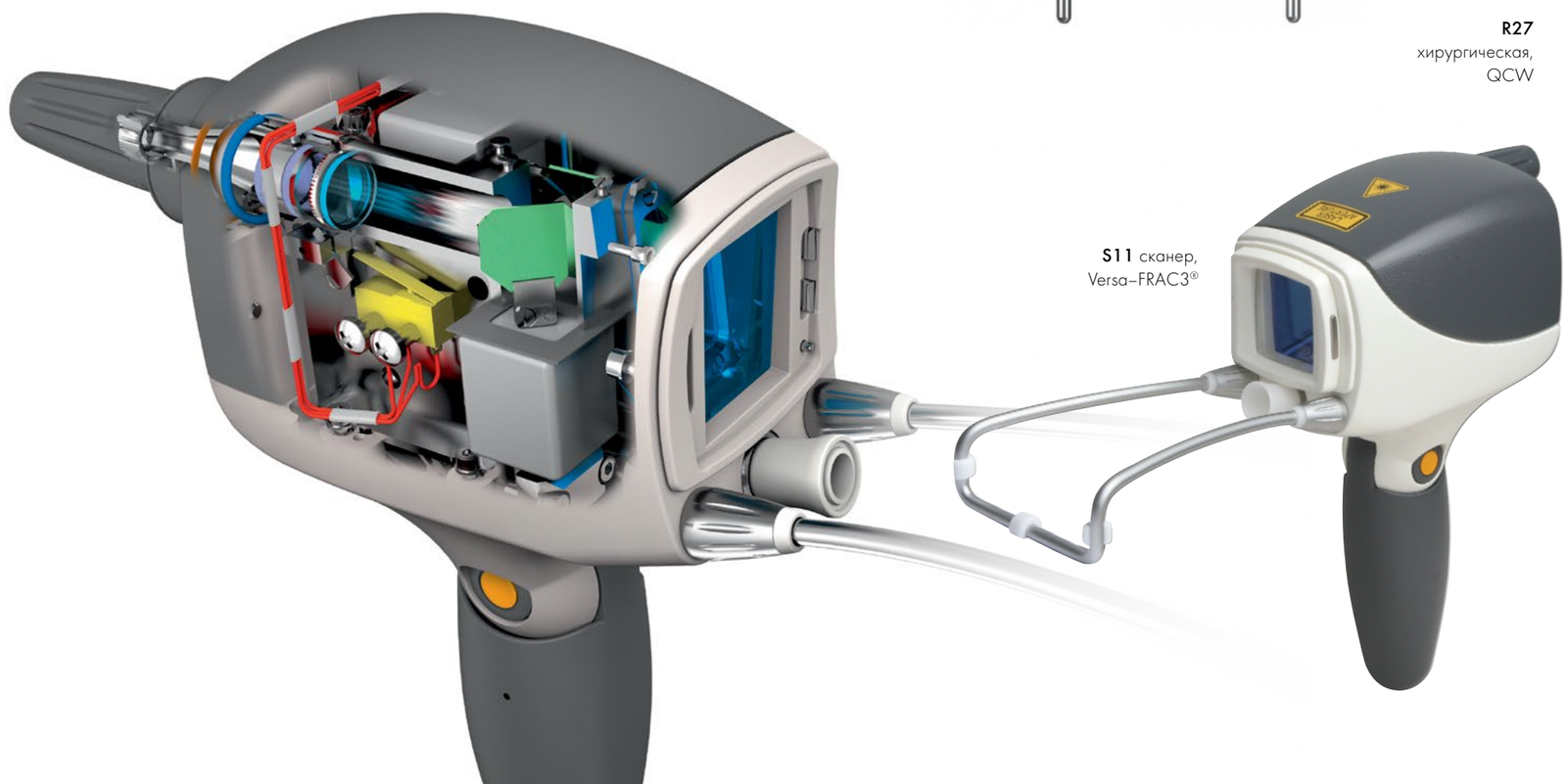

S11 сканер, Versa–FRAC3®

Fotona
choose perfection

60
years of innovation

ОСНОВАНА В 1964 ГОДУ

Fotona гарантирует своим клиентам высочайшее качество, безопасность и эффективность, подтвержденные полным пакетом разрешительных документов. Дистрибьютор компании Fotona (Словения) в России и Казахстане — группа компаний «СпортМедИмпорт»



8 800 222 97 79
fotona.ru